



DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PĚNOVÝ PŘÍPRAVEK PRO LÉKAŘSKÉ A CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

Aniosyme Prime

DEZINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PĚNOVÝ PŘÍPRAVEK PRO LÉKAŘSKÉ A CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

- Složení kombinuje dva patenty účinnosti
- Zabraňuje vysychání povrchu
- Antimikrobiální účinnost od 15 min
- Hustá pěna umožňuje rovnoměrné pokrytí nástrojů
- Široká materiálová kompatibilita



Aniosyme Prime


Dezinfekční a čistící pěnový přípravek pro prvotní ošetření lékařských a chirurgických nástrojů

OBLAST POUŽITÍ


Dezinfekční prostředek ve formě pěny k přímému použití pro dezinfekci a následně snadné odloučení znečištění kontaminovaného použitého nástroje při delším skladování nebo transportu (až 72 hodin) před manuálním nebo automatickým mytím v myčkách.

Dezinfikuje, zabraňuje zaschnutí znečištění a výrazně usnadňuje čištění. Hustá pěna garantuje celkové pokrytí povrchu nástrojů. Aniosyme Prime je kompatibilní s běžně používanými materiály. Není vhodný pro nástroje ze zinku a železa bez antikorozivní úpravy.


NÁVOD K POUŽITÍ

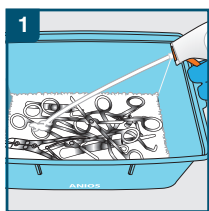


1. Nastříkejte pěnu Aniosyme Prime na dno dezinfekční nádoby a vložte do ní nástroje.

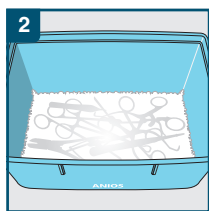

2. Povrch rozložených nástrojů pokryjte pěnou. Nejkratší čas expozice je 15 minut, pro účinnost proti TBC 30 minut.

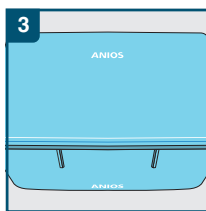

3. Kontejner s nástroji přikryjte víkem.

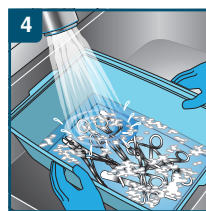

4. Ošetřené nástroje před manuálním mytím nebo vložením do automatické myčky důkladně opláchněte pitnou vodou, kvůli odstranění zbytků produktu a organického znečištění.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

PODMÍNKY	DOBA EXPOZICE
Baktericidní - EN 1040, EN 13727, EN 14561 a EN 13727 proti MDRB	15 min
Účinnost proti kvasinkám - EN 1275, EN 13624 a EN 14562	15 min
Tuberkulocidní EN 14348 a EN 14563, nečisté podmínky	30 min
Mykobaktericidní včetně TBC - EN 14348 a EN 14563 (M. terrae, M. Avium)	60 min
Účinné proti obaleným virům EN 14476 a EN 17111, nečisté podmínky	15 min

BALENÍ A ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
Aniosyme Prime	12 x 750ml lahve	3102830

Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Opatření:

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Odstranění:

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.



GHS05



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributor pro ČR:

ECOLAB s.r.o.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

OBLAST POUŽITÍ

Prvotní ošetření chirurgických nástrojů ve formě pěny. Pro transport znečištěných nástrojů "suchou cestou" nebo jejich delší skladování před manuálním nebo automatickým mytím. Dezinfikuje a udržuje optimální hladinu vlhkosti a brání zaschnutí krve a organických nečistot na povrchu nástrojů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek k přímému použití

1. Nastříkejte pěnu Aniosyme Prime na dno dezinfekční nádoby láně a vložte do ní nástroje.
2. Povrch rozložených nástrojů pokryjte pěnou. Nejkratší čas expozice je 15 minut, pro účinnost proti TBC 30 minut.
3. Zakryjte dezinfekční nádobu víkem.
4. Ošetřené nástroje před manuálním mytím nebo vložením do automatické myčky důkladně opláchněte pitnou vodou, kvůli odstranění zbytků produktu a organického znečištění.

Není vhodný pro nástroje ze zinku a železa bez antikorozivní úpravy.

SLOŽENÍ

Kvarterní uhličitan amonný, neionogenní tenzidy enzymatický komplex (proteáza, lipáza, amyláza), sekvestrační činidla, pomocné látky.

SKLADOVÁNÍ

Nebezpečí. Dbejte bezpečnostních pokynů (vypracovaných v souladu s platnými evropskými pravidly týkajícími se klasifikace a označování chemických přípravků). Skladujte při teplotách +5°C a +25°C.

CERTIFIKACE

Zdravotnický prostředek. Plná antimikrobiální aktivita produktu Aniosyme Prime je součástí vědecké dokumentace.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. DBEJTE BEZPEČNOSTNÍCH POKYŇŮ

Pozorně si přečtěte příbalový leták



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

