



## Katalog

### NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKA



Nitroděložní tělísko

# Eurogine Gold T

 Aktivní materiál **měď / zlato**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíška **T**

 Velikosti **3 (mini, normal, maxi)**



Obsahuje  
**375 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**



Ve Španělsku byla provedena studie, která prokázala, že i stříbro, navzdory tomu, že je ušlechtilý kov, podléhá korozi pod vlivem děložních tekutin. V důsledku toho společnost EUROGINE vyvinula vysoce čistý měděný drát se zlatým jádrem, které je naprosto imunní vůči korozi a je také plně biokompatibilní s lidským tělem. To zlepšuje i spolehlivost měděného drátu jako antikoncepce a eliminuje případné alergie. Tělísko EUROGINE Gold T má také zaváděcí systém, který zaručuje bezpečné umístění tělíška do fundu dělohy. To je velmi důležité pro dosažení nejvyšší účinnosti této metody antikoncepce. Dodržováním několika jednoduchých pokynů, zaváděč tělíška Gold T znemožňuje náhodnou perforaci dělohy při zavádění.

## Technické vlastnosti:

- 375 mm<sup>2</sup> povrchu mědi • Nejspolehlivější nehormonální nitroděložní tělísko: 99,9% čistý měděný drát + zlaté jádro o průměru 0,1 mm • Antikoncepční funkčnost až na 5 let • Y-tvar (Novaplust) IUD • K dispozici 3 velikosti (Maxi, Normal, Mini), které usnadňují zavádění do dělohy a zvyšují komfort pacientky
- Měděný drát + zlaté jádro snižuje riziko zlomení spirály • Unikátní a jednoduchý systém vkládání, který poskytuje vyšší stupeň přesnosti umístění v dutině děložní a eliminuje riziko perforace dělohy • CE značka

		Kód	Velikost	Šířka	Délka
Tělísko	Polyethylene + Barium Sulfate	1040000	Maxi	36,5 mm	38 mm
		1040100	Normal	31 mm	33 mm
		1040200	Mini	24 mm	30,5 mm
Drát	Čistota mědi > 99,9 %	Průměr: 0,40 mm	Délka: 298 mm	Plocha: 375 mm <sup>2</sup>	Průměr zlatého středu: 0,1 mm
Vlákná	Polyethylene	Průměr: 0,25 mm	Délka: 450 mm x 2		
Zaváděč	Polyethylene	Vnější průměr: 3,80 mm			
Zaváděcí škála	ABS	Hysterametr rozmezí 5-10 cm s intervaly 0,5 cm			

Nitroděložní tělísko

# Pregna

## Inara Cu 375



Obsahuje  
**375 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**

 Aktivní materiál **měď**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíska **Ω**

 Velikosti **1 (normal)**



Nitroděložní tělíška jsou nejpoužívanější reverzibilní antikoncepci na světě. Jedním z běžně používaných měděných tělíšek je Inara Cu 375. Klíčovým rysem tělíšek Inara Cu 375 je snadné zavedení a snadná manipulace pro lékaře.

### Technické vlastnosti


• Tělísko Inara je předpřipraveno na zavedení v zavaděči bez nutnosti další manipulace, ke správnému zavedení je tedy zapotřebí méně úkonů • Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů • Tvar tělíška Inara zaručuje nižší pravděpodobnost jeho vypuzení a náhodné perforace fundu při zavádění • Tělísko Inara Cu 375 nabízí dlouhodobou antikoncepční ochranu až na 5 let

Tělísko	Kód	Šířka	Délka
	INARA375	17,31 - 19,13 mm	34,36 - 35,90 mm
Drát	Průměr: 0,38 - 0,40 mm	Délka: 291 - 306 mm	Plocha: 375 mm <sup>2</sup> ± 37,50 mm <sup>2</sup>
Vlákna	Průměr: 0,20 - 0,30 mm	Délka: 235 - 250 mm	
Zavaděč	Vnější průměr: 3,60 - 3,80 mm	Délka: 200 - 204 mm	
Zavaděcí škála	Hysterametr rozmezí 5 - 10 cm s intervaly 1 cm		

Nitroděložní tělísko

# Pregna

## Copper T 380A

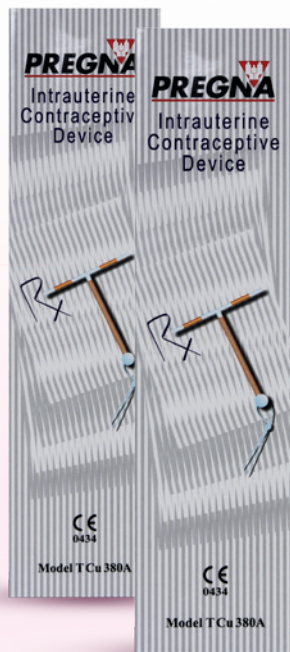


Obsahuje  
**380 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi


Doba účinnosti  
**10 let**

 Aktivní materiál **měď**

 Doba účinnosti **10 let**

 Tvar tělíska **T**

 Velikosti **1 (normal)**

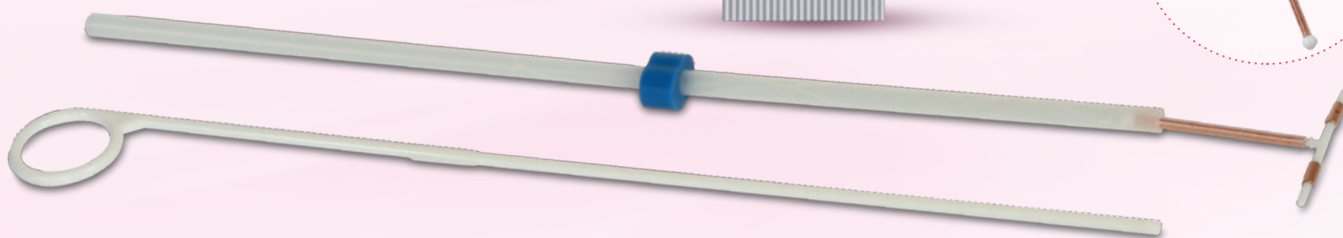

Tělísko Pregna Copper T 380A je velmi spolehlivá, bezpečná a snadná antikoncepční metoda s dlouhodobým účinkem od zavedení (10 let). Použití tohoto tělíska je jednou z nejspolehlivějších antikoncepčních metod, kdy míra selhání je menší než 1%. Použití této metody antikoncepce nabízí kompletní obnovení plodnosti po vyjmutí tělíska. Vyjmutí tělíska je velmi snadné.


### Technické vlastnosti:

• "T" rameno speciálně upraveno pro zvýšení jeho pevnosti • Tělísko je baleno do obalu folie-folie – tento obal je odolnější proti vlhkosti a nabízí lepší ochranu pro měděné části tělíska T 380A • Pevná tyčinka u tělíska Pregna Copper T 380A má speciální povrch, který ji drží na místě, i když lékař drží zavaděč ve svislé poloze • Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů • Pregna Copper T 380A nabízí dlouhodobou ochranu až na 10 let • Plodnost se obnoví po vyjmutí a je zcela bezpečná i pro kojící matky • Vysoká účinnost – více než 99 %.

Tělísko	Kód	Šířka	Délka
	PREGNAT380	31,50 – 32,50 mm	35,50 – 36,50 mm
Drát	Průměr: 0,25 – 0,26 mm	Délka: 385 – 420 mm	Povrch: 380 mm <sup>2</sup> ± 38 mm <sup>2</sup>
Vlákna	Průměr: 0,20 – 0,30 mm	Délka: 105 – 125 mm	
Tyč	Průměr: 2,50 – 2,80 mm	Užitečná délka: 185 – 195 mm	
Zavaděč	Vnější průměr: 4,36 – 4,50 mm	Délka: 205 – 208 mm	

Nitroděložní tělísko


# Pregna Safeload

 Aktivní materiál **měď**

 Doba účinnosti **10 let**

 Tvar tělíska **T**

 Velikosti **1 (normal)**

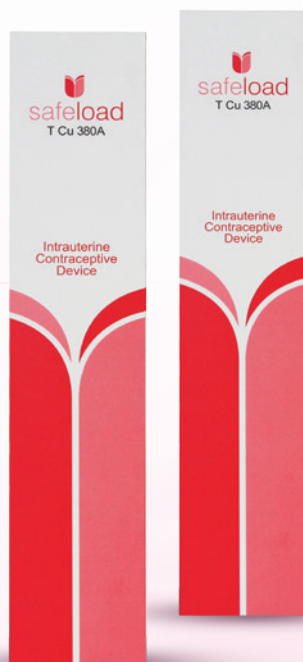

Obsahuje  
**380 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**10 let**



Nitroděložní tělísko Safeload typu T s měděným drátem o ploše 380 mm<sup>2</sup>. Pregna přišla s unikátním systémem, který umožní aseptické zavedení měděného tělíska tvaru T. Jedná se o inovativní zaváděcí bezdotykový systém Safeload. Použití Safeload vyžaduje velmi malou přípravu na straně lékaře.

## Technické vlastnosti:


• Zavedení „T“ tělíska se systémem Safeload je přesné a vyžaduje minimální úsilí • Obě ramena „T“ tělíska jsou rovnoměrně uložena v zaváděči, toto uložení eliminuje pravděpodobnost protržení sáčku • Nabízí vynikající bezdotykovou techniku • Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů • Modifikovaný zaváděč usnadňuje umístění do správné polohy • Připravená tyčinka v zaváděči usnadňuje zavedení o jeden krok • Pregna Safeload nabízí dlouhodobou ochranu až na 10 let • Safeload má všechny výhody tělíska Pregna Copper T 380A

Tělísko	Kód	Šířka	Délka
	SAFELOADT380	31,50 - 32,50 mm	35,50 - 36,50 mm
Drát	Průměr: 0,25 - 0,26 mm	Délka: 385 - 420 mm	Povrch: 380 mm <sup>2</sup> ± 38 mm <sup>2</sup>
Vlákna	Průměr: 0,20 - 0,30 mm	Délka: 105 - 125 mm	
Tyč	Průměr: 2,50 - 2,80 mm	Užitečná délka: 185 - 195 mm	
Zavaděč	Vnější průměr: 4,36 - 4,50 mm	Délka: 185 - 187 mm	
Zavaděcí škála	Hysterametr rozmezí 2 - 12 cm s intervaly 1 cm		

Nitroděložní tělísko

# Eurogine

## Novaplus T 380 Cu

 Aktivní materiál **měď**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíska **T**

 Velikosti **2 (mini, normal)**

eurogine	eurogine
Dispositivo Int	Dispositivo Intrauterino
Aparelho Intra	Aparelho Intra uterino
Intrauterine	Intrauterine Device
Dispositif Int	Dispositif Intra-Utérin
Dispositiv Int	Dispositiv Intrauterin
Méhen belül	Méhen belülü eszköz
Rahim içi	Rahim içi Araç
Intrauterin	Intrauterinpesar
Вътрематочна	Вътрематочна спирала
Ενδομήτριο σ	Ενδομήτριο σπειράμα
Intrauterina	Intrauterina lerice
Wkład	Wkładka
Wewnątrz	Wewnątrzmaciczna
Nitroděložní	Nitroděložní Tělísko
Livmoderir	Livmoderinlägg
Контраце	Контрацептив
внутрішньом	внутрішньоматковий

Obsahuje  
**380 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**



Nitroděložní tělísko ve tvaru T. Množství použitého měděného drátu (jeho plocha) nemá vliv na vedlejší účinky daného tělíska. Na snášenlivost a dobu antikoncepčního účinku nemá vliv skutečnost, jestli měděný drát obsahuje zlaté nebo stříbrné jádro. Dobře zvolené a správně zavedené tělísko poskytuje ženám podobnou nebo dokonce lepší úroveň ochrany proti početí než pilulky, a to bez vedlejších účinků. WHO (Světová zdravotnická organizace) uvedla, že tělíska jsou tou nejlepší metodou antikoncepce vzhledem k jejich vynikajícímu poměru účinnosti, ceny a vedlejších účinků.

### Technické vlastnosti:


• 380 mm<sup>2</sup> povrchu mědi • Čistota měděného drátu je 99,9% • K dispozici tři velikosti (Maxi, Normal, Mini) • Tělísko ve tvaru Y (NOVAPLUS) • Antikoncepční účinnost až 5 let, dle doporučení WHO • CE značka

Tělísko	Polyethylene + Barium Sulfate	Kód	Velikost	Šířka	Délka
		01020100	Normal	31 mm	33 mm
		01020200	Mini	24 mm	30,50 mm
Drát	Čistota mědi > 99,9 %	Průměr: 0,40 mm	Délka: 302 mm	Plocha: 380 mm <sup>2</sup>	
Vláknina	Polyethylene	Průměr: 0,25 mm	Délka: 280 mm x 2		
Tyč	Polypropylene	Průměr: 2,20 mm	Užitečná délka: 200 mm		
Zavaděč	Polyethylene	Průměr: 3,80 mm	Délka: 195 mm		
Distanční kroužek	Polypropylene	Šířka: 7,80 mm	Délka: 12,50 mm	Výška: 6,25 mm	

Nitroděložní tělísko

# Eurogine

## Áncora 375 Cu

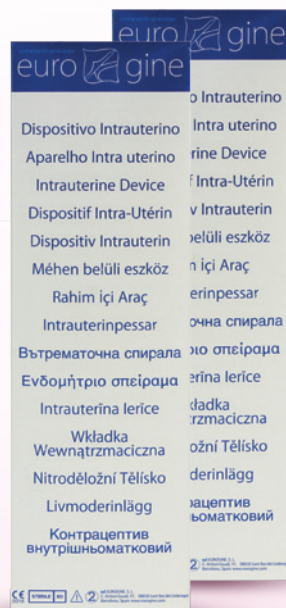

Obsahuje  
**375 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**

 Aktivní materiál **měď**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíska **Ω**

 Velikosti **1 (normal)**



Tělísko tvaru „omega“ s měděným drátkem o ploše 375 mm<sup>2</sup>. Vyznačuje se především velice snadným zaváděním a jedním z nejpoužívanějších antikoncepčních nitroděložních tělísek vůbec.

### Technické vlastnosti:

• 375 mm<sup>2</sup> povrchu mědi • Čistota měděného drátu 99,9% • Tvar tělíska „Multiload“ • Antikoncepční účinnost 5 let • Označením CE

Tělísko	Polyethylene + Barium Sulfate	Kód	Velikost	Šířka	Délka
Drát	Čistota mědi > 99,9 %	01030000	Normal	20 mm	35 mm
Vlákna	Polyethylene	Průměr: 0,25 mm	Délka: 298 mm	Plocha: 375 mm <sup>2</sup>	
Zavaděč	Polypropylene	Průměr: 3,80 mm	Délka: 280 mm x 2		
Distanční kroužek	Polypropylene	Šířka: 7,80 mm	Délka: 195 mm	Délka: 12,50 mm	Výška: 6,25 mm

Nitroděložní tělísko

# Eurogine


## Novaplus T 380 Ag

 Aktivní materiál **měď / stříbro**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíška **T**

 Velikosti **3 (mini, normal, maxi)**

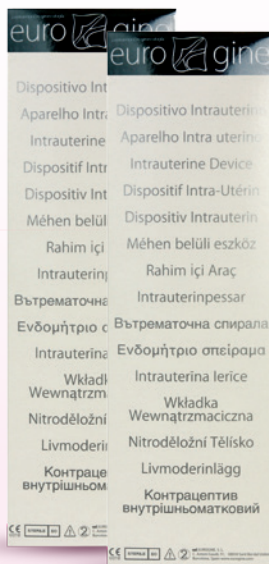

Obsahuje  
**380 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**



Stříbrná tělíška Eurogine Novaplus jsou přesně stejná jako měděná pokud jde o tvar, velikost nebo množství mědi ve spirále. Aby se však zabránilo procesu koroze antikoncepčního měděného drátu, a tím zachování jeho antikoncepčních schopností, byl vyvinut speciální měděný drát, který zabraňuje případnému rozlomení na více částí vlivem koroze. V tomto stříbrném tělísku je měděný drát, který obsahuje stříbrné jádro tvořící přibližně jednu třetinu z celkového průměru. Toto stříbrné jádro zabraňuje rozlomení měděného drátu v případě zkorodování v děloze. Díky tomu, že stříbro je ušlechtilý kov, nedochází ke korozi způsobené kyselinami obsaženými v děložní tekutině. Skutečnost, že spirála mědi zůstává beze změny po celou dobu životnosti antikoncepčního tělíška je významnou přidanou hodnotou a posiluje antikoncepční účinek.

### Technické vlastnosti:

- 380 mm<sup>2</sup> povrchu mědi v závislosti na modelu
- 99,9% čistý měděný drát + stříbrné jádro Ø 0,1 mm
- K dispozici ve třech velikostech (Maxi, Normal, Mini)
- Y-tvaru (NOVAPLUS)
- Antikoncepční bezpečnost až 5 let, dle doporučení WHO
- CE značka


		Kód	Velikost	Šířka	Délka
Tělísko	Polyethylene + Barium Sulfate	01010600	Mini	31 mm	33 mm
		01010500	Normal	24 mm	30,50 mm
		01010700	Maxi	36,5 mm	38 mm
Drát	Čistota mědi > 99,9 %	Průměr: 0,40 mm	Délka: 302 mm	Plocha: 380 mm <sup>2</sup>	Průměr stříbrného středu: 0,1 mm
Vláčna	Polyethylene	Průměr: 0,25 mm	Délka: 280 mm x 2		
Tyč	Polypropylene	Průměr: 2,20 mm	Užitečná délka: 200 mm		
Zavaděč	Polyethylene	Průměr: 3,80 mm	Délka: 195 mm		
Distanční kroužek	Polypropylene	Šířka: 7,80 mm	Délka: 12,50 mm	Výška: 6,25 mm	



Nitroděložní tělísko

# Eurogine

## Áncora 375 Ag

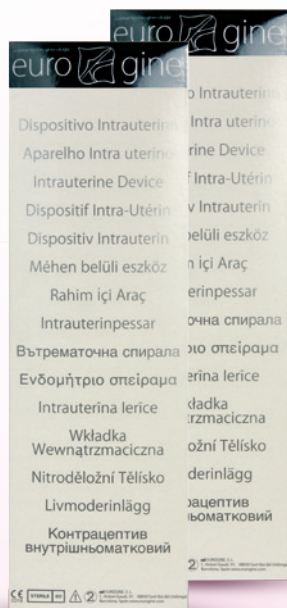

Obsahuje  
**375 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi


Doba účinnosti  
**5 let**

 Aktivní materiál **měď / stříbro**

 Doba účinnosti **5 let**

 Tvar tělíska **Ω**

 Velikosti **1 (normal)**

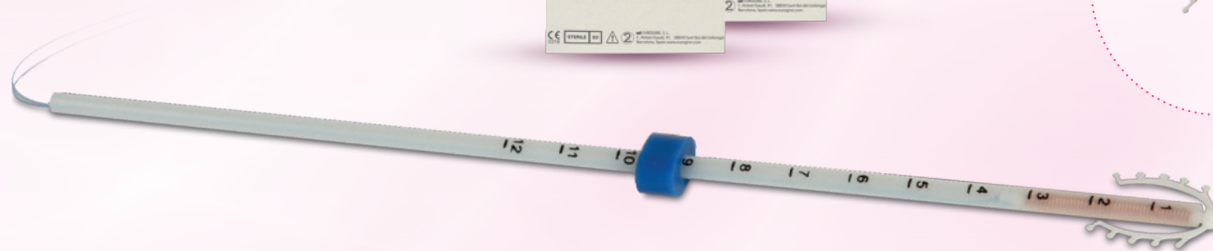

Stříbrná tělíska Eurogine Novaplust jsou přesně stejná jako měděná pokud jde o tvar, velikost nebo množství mědi ve spirále. Aby se však zabránilo procesu koroze antikoncepčního měděného drátu, a tím zachování jeho antikoncepčních schopností, byl vyvinut speciální měděný drát, který zabraňuje případnému rozlomení na více částí vlivem koroze. V tomto stříbrném tělísku je měděný drát, který obsahuje stříbrné jádro tvořící přibližně jednu třetinu z celkového průměru. Toto stříbrné jádro zabraňuje rozlomení měděného drátu v případě zkorodování v děloze. Díky tomu, že stříbro je ušlechtilý kov, nedochází ke korozi způsobené kyselinami obsaženými v děložní tekutině. Skutečnost, že spirála mědi zůstává beze změny po celou dobu životnosti antikoncepčního tělíska je významnou přidanou hodnotou a posiluje antikoncepční účinek.

### Technické vlastnosti:


• 380 mm<sup>2</sup> povrchu mědi • 99,9% čistý měděný drát + stříbrné jádro Ø 0,1 mm • "Multiload" tvar • Antikoncepční bezpečnost 5 let • CE značka

Tělísko	Polyethylene + Barium Sulfate	Kód	Velikost	Šířka	Délka
Drát	Čistota mědi > 99,9 %	01030400	Normal	20 mm	35 mm
Vlákna	Polyethylene	Průměr: 0,25 mm	Délka: 298 mm	Plocha: 375 mm <sup>2</sup>	Průměr stříbrného středu: 0,1 mm
Zavaděč	Polypropylene	Vnější průměr: 3,80 mm	Délka: 195 mm		
Distanční kroužek	Polypropylene	Šířka: 7,80 mm	Délka: 12,50 mm	Výška: 6,25 mm	

Nitroděložní tělísko

# Pregna

## Silverline Cu 380 Ag

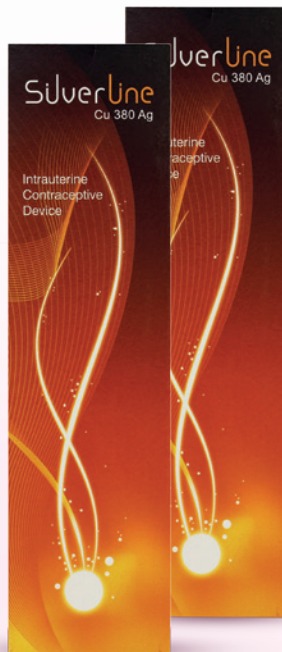

Obsahuje  
**375 mm<sup>2</sup>**  
povrchu mědi

Doba účinnosti  
**5 let**



Aktivní materiál **měď / stříbro**



Doba účinnosti **5 let**



Tvar tělíška **T**



Velikosti **1 (normal)**



Tělísko Silverline Cu 380Ag poskytuje vyšší komfort a pohodlí uživatelce, která se rozhodla pro tuto antikoncepční metodu. Je to ideální řešení pro ženy, které hledají dlouhodobou reverzibilní antikoncepci s absolutním pohodlím.

### Technické vlastnosti:

- Pružné paže tělíška Silverline umožňují perfektní umístění v děložním fundu
- Tělísko Silverline je šetrné při vkládání a vyjímání
- V tělísku Silverline je měděný drát se stříbrným jádrem, které zabraňuje jeho rozlomení
- Silverline Cu 380 Ag nabízí dlouhou ochranu až 5 let
- Silverline vyžaduje třetinovou dilataci děložního hrdla při zavádění, ve srovnání s měděným tělískem Cu T 380A
- Měkká nylonová vlákna nijak neomezují sexuální život partnerů


Tělísko	Kód	Šířka	Délka
	SILVER380	30 - 32 mm	31,50 - 35,00 mm
Drát	Průměr: 0,39 - 0,41 mm	Délka: 279 - 341 mm	Plocha: 380 mm <sup>2</sup> ± 38 mm <sup>2</sup> Průměr stříbrného středu: 0,1 mm
Vlákna	Průměr: 0,20 - 0,30 mm	Délka: 300 - 320 mm	
Tyč	Průměr: 2,50 - 2,70 mm	Užitečná délka: 200 - 206 mm	
Zavaděč	Vnější průměr: 3,60 - 3,80 mm	Délka: 200 - 204 mm	
Zavaděcí škála	Hysterametr rozmezí 5 - 10 cm s intervaly 1 cm		



Navštivte naše internetové stránky

**www.medplus.cz**

**Naleznete zde kompletní informace k námi nabízeným tělískům** – fotografie, návody, certifikáty, technické parametry a instruktážní videa.

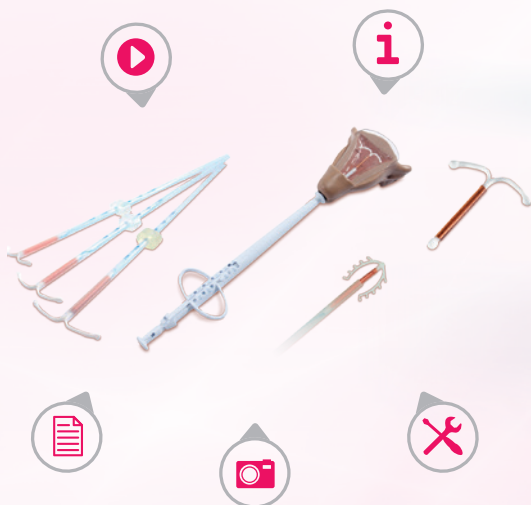

### Co jsou nitroděložní tělíška a k čemu slouží?

Nitroděložní tělíška jsou celosvětově nejpoužívanější metodou reverzibilní antikoncepce. Zaručují dlouhodobý antikoncepční účinek a k obnovení plodnosti dochází v krátké době po vyjmutí tělíška. Nehormonální nitroděložní tělíška mají minimum vedlejších účinků a nepředstavují žádné omezení pro partnerský život. Výhodou nehormonálních nitroděložních tělíšek je jejich dlouhodobý antikoncepční účinek, který je dle typu použitého tělíška 3–10 let.

### Jak nitroděložní tělíško funguje?

Nitroděložní tělíško, jak už je z názvu patrné, se zavádí do děložní dutiny. Základem tělíška je plastové rameno, na kterém je navinut měděný drát. Tělíško svou přítomností v děloze koncentruje bílé krvinky, které samy o sobě ničí spermie. Antikoncepční účinnost je pak zvýšena přidáním měděného drátku o různé ploše, který uvolňuje ionty, jež spermie přímo ničí.

### Nitroděložní tělíška smí aplikovat pouze proškolený zdravot. personál

Nitroděložní tělíško musí být zavedeno proškoleným zdravotnickým personálem, který zabezpečí vhodnost použití tohoto druhu antikoncepce u konkrétní uživatelky.

Nitroděložní tělíška dodáváme poskytovatelům zdravotní péče a lékárnám v České a Slovenské republice.

### Proč nitroděložní tělíška od firmy Medplus?

- Nabízíme pouze ověřená a kvalitní nitroděložní tělíška
- Všechna námi nabízená nitroděložní tělíška mají certifikáty
- Poradenství a servis je pro naše klienty samozřejmostí

Více naleznete na [www.medplus.cz](http://www.medplus.cz)



Váš dodavatel  
zdravotnických potřeb

**MED+**  
Mediplus



Katalog **NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKA**

Medplus s.r.o.

**Váš dodavatel zdravotnických potřeb**

Lidická 886/43, 736 01 Havířov-Šumbark

Ing. Pavla Medonosová

Tel.: +420 731 505 202

E-mail: medonosova@medplus.cz

Milena Lenartová

Tel.: +420 731 505 201

E-mail: lenartova@medplus.cz

Volejte zdarma: **800 880 864**

Web: **[www.medplus.cz](http://www.medplus.cz)**