

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku a jednorázových utěrek pro dezinfekci malých ploch otěrem.

Vysoký standard hygieny a čistoty.

safe & easy
bag-in-box system

safe & easy
bagless system



the plus of pure performance

- 
- A young child with blonde hair is lying in a hospital bed, wearing a blue patterned shirt and a clear oxygen mask. The child's eyes are closed. The background is a brightly lit hospital room with various medical equipment, including monitors and IV stands, slightly out of focus.
- V rizikových oblastech a pro rizikové pacienty snadno a bezpečně se schülke wipes safe & easy.

schülke wipes safe & easy

Jednoduché, a proto mimořádně bezpečné.

schülke wipes



schülke wipes

safe & easy
bag-in-box system



schülke wipes

safe & easy
bagless system



Rychlé a praktické

schülke wipes – Zásobníky s utěrkami, které se přelíjí pracovním roztokem dezinfekčního přípravku. Pro rychlou a snadnou dezinfekci ploch v méně rizikových oblastech. Stabilita roztoků po 28 dní.

Mimořádně bezpečné

schülke wipes safe & easy – Jednorázové sety zásobníku a utěrek, obzvláště vhodné pro použití v oblastech s vysokým rizikem infekce pro pacienty a personál. Pro vysokou úroveň bezpečnosti, hygieny a čistoty s minimalizací rizika kontaminace. Set je určený pouze pro jednorázové použití (zásobník/bag).

Používáním schülke ubrousků docílíte vysokého standardu hygieny a bezpečnosti i v rizikovém prostředí!

Čím vyšší je riziko infekce pro pacienty a zaměstnance, tím důležitější je důsledná, bezpečná a spolehlivá dezinfekce.



Pro rizikové prostředí

Riziko infekce*

- Prostředí s vysokým rizikem infekce a izolační pokoje
- Prostředí s infekčním rizikem zejména pro personál
- Prostředí s možným nebezpečím infekce

* dle doporučení RKI: Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen (2004)

safe & easy

bagless system

schülke wipes safe & easy

Návod na použití (hygienické podmínky):

Krok 1

Pro ochranu zdraví pracovníků i prevenci kontaminace schülke wipes safe & easy Vám doporučujeme před započatím práce si vydezinfikovat ruce, nasadit rukavice a ochranné pomůcky (oděv, brýle).



Můžete také shlédnout výukové video safe & easy Training Video (www.youtube.com/user/Schuelkechannel)



Nebo naskenujte tento QR KÓD napravo.

Více informací najdete na: www.safe-and-easy.com



Krok 2

Odlepte samolepící štítek ze zásobníku.



Krok 3

Přilepte štítek na vyznačené místo na kbelíku.



Krok 4

Povytáhněte jeden ubrousek ze středu role. Nalijte do otvoru ve víku 3 litry předem připraveného pracovního roztoku nebo 2 l hotového koncentrovaného roztoku (v případě roztoků ready to use). Roztok vlévejte pomalu a rovnoměrně kruhivým pohybem přes celou roli utěrek v zásobníku.



Krok 5

Vyjměte víčko z ochranného obalu. Protáhněte první povytažený ubrousek přes střed víčka.



Krok 6

Zatlačte víčko do otvoru ve víku a otočením zašroubujte.



Krok 7

První povytažený ubrousek vytáhněte a vyhodte. Víčko opatrně uzavřete.



Krok 8


Vyplňte údaje na štítku.



Krok 9

Nechejte ubrousky nasáknout roztokem po dobu 30 minut.

30 min.

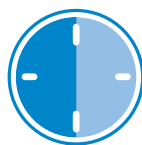

Krok 10

Schülke wipes safe & easy utěrky jsou připraveny k použití. Vytáhněte ubrousky a stírejte povrch. Vždy řádně uzavřete víčko na zásobníku.



Ubrousky je možné používat po dobu 28 dnů. Po uplynutí této doby ubrousky již nepoužívejte a zlikvidujte obal i obsah zásobníku.

safe & easy
bezpečné. rychlé. stabilní.

schülke wipes

safe & easy
bagless system

Výborné, protože ...

- Jednoduché použití a vysoká úroveň hygieny
- Snadné přenášení díky praktickému úchytu
- Dostatečná velikost ubrousků
- Použití dezinfekčního roztoku a účinné látky dle Vašeho výběru
- Průhledné víko pro kontrolu spotřeby vlhčených ubrousků
- Stohovatelné / prostorově úsporné zásobníky

Bezpečnost pro všechny druhy povrchů:

- Systém je opatřen pojistným štítkem, který zaručuje jednorázové použití
- Provedeny testy stability s produkty schülke / Bochemie
- Ochrana proti znečištění otvoru víčka před prachem

Jednorázový systém



bezpečný
pojistka pro jednorázové použití

rychlý
snadná a rychlá příprava

stabilní
stabilní obsah aktivních látek
a bezpečné použití


Řada safe & easy

Bezpečné a jednoduché v každém kroku přípravy.

Malý rozdíl s velkým vlivem.

schülke wipes – Zásobníky k opakovanému použití.


1. Válec utěrek vložte přímo do zásobníku a přelijte krouživým pohybem povrch utěrek pracovním roztokem nebo koncentrátem vybraného dezinfekčního přípravku.
2. Vyplňte štítek potřebnými údaji.
3. Po vypotřebování utěrek nebo nejpozději po 28 dnech používání vyprázdněte zásobník. Připravte zásobník a víko pro další použití.

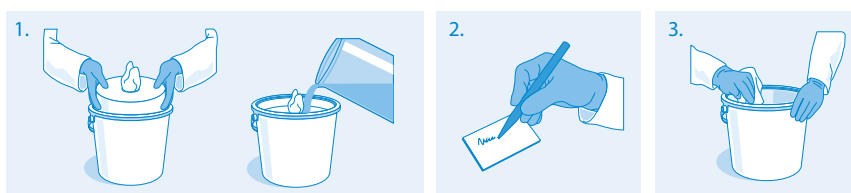

Univerzálně použitelný

Kritické fáze při využívání systémů utěrek v zásobníku:*

1. Plnění
2. V průběhu používání
3. Příprava na další použití

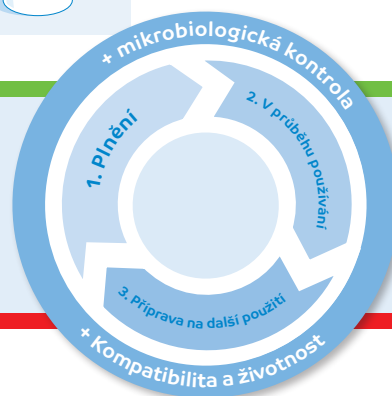

schülke wipes


safe & easy
bag-in-box systém

safe & easy
bagless systém

– Mimořádně bezpečné systémy

1. **Safe/Bezpečné:** V sáčku / zásobníku je role utěrek chráněna.
2. V den přípravy vyplňte přiložený štítek. Poznačte si den ukončení používání (max. 28 dní ode dne přípravy).
3. **Easy/Snadné:** po vypotřebování, nebo po 28 dnech prostě zlikvidujete.

safe & easy bag in box systém (sáček v zásobníku) ...

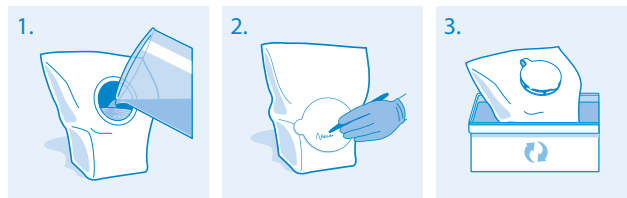

... nebo rychlejší bagless systém (bez sáčku).



Hygienickou úroveň lze snadno zvýšit použitím jednorázových systémů zásobníků a utěrek.

* 1. Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorgetränkensystem für die Flächendesinfektion (2012)
2. Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil (2013)

schülke wipes | schülke wipes safe & easy

Přehled

Jak si vybrat správný systém vlhčených ubrousků?



		Systém zásobníků a vlhčených ubrousků			
		schülke wipes mini zásobník (40 ubrousků)	schülke wipes zásobník (100 ubrousků)	schülke wipes safe & easy bag-in-box System (111 ubrousků v Bagu / sáčku)	schülke wipes safe & easy bagless System (130 vložených ubrousků)
		Mat.-Nr. 119530	Mat.-Nr. 119523	Mat.-Nr. 119542	Mat.-Nr. 119544
Náhled produktů					
Rizikovost prostředí		nízké riziko	nízké riziko	vysoké riziko	vysoké riziko
Oblast použití		Systém zásobníků a vlhčených utěrek pro použití ve všech oblastech nemocnic, pečovatelských domů, ambulancí a rychlé lékařské služby. Zásobníky pro opakované použití.		Zásobníky a utěrky schülke wipes safe & easy jsou ideální dezinfekční ubrousky pro použití do oblastí se zvláště vysokým rizikem přenosu patogenů (např. intenzivní péče, imunodeficitní pacienti, neonatalogie).	
Aplikace / Likvidace		Doplnění zásobníků novou rolí utěrek po použití / dopotřebování / uplynutí doby expirace.		Bag se šroubovacím uzávěrem po spotřebování zlikvidovat.	Celý zásobník po spotřebování obsahu zlikvidovat.
Počet ubrousků	schülke wipes mini 40 Mat.-Nr. 119532	40			
	schülke wipes 100 Mat.-Nr. 119503		100		
	schülke wipes safe & easy bag Mat.-Nr. 119544			111 (v bagu)	
	schülke wipes safe & easy bagless systém Mat.-Nr. 119544				130 (vložených ubrousků)
Potřebné množství tekutiny (pracovního roztoku či koncentrátu)		1,5 l	3 l pracovního roztoku nebo 2 l roztoku ready-to-use		
Vhodné dezinfekční přípravky „Ready to use“*		• mikrozyd® AF liquid • mikrozyd® sensitive liquid • desprej • desprej sensitive			
Vhodné dezinfekční přípravky pro přípravu roztoků*		• antifekt® extra • Desinfektions-Reiniger AF • terralin® protect • terralin® PAA** • Desam Effekt • Desam Extra • Desam OX • Desam GK • Chloramin T • Chloramix DT			

* Maximální životnost 28 dní / ** Maximální životnost až 12 hodin v schülke mini



Videa školení pro plnění systémů schülke wipes lze nalézt na YouTube (www.youtube.com/user/schuelkeChannel)



NOVÉ

vhodné zejména pro rizikové oblasti

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku a vlhčených utěrek.

safe & easy
bagless system

Naše Plus

- inovativní bezsáčkový systém se 130 vloženými utěrkami
- odpadá složitá příprava
- velmi rychlá a snadná manipulace
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.safe-and-easy.com



Logistické informace:

schülke wipes safe & easy bagless system

Karton se 6-ti zásobníky á 130 ks utěrek

Mat.-Nr. 119544

Rozměry utěrek: 31,5 x 18,5 cm

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



vhodné zejména pro rizikové oblasti

schülke wipes safe & easy

Inovativní systém zásobníku a vlhčených utěrek v bagu.

safe & easy
bag-in-box system

Naše Plus

- inovativní bag-in-box systém se 130 utěrkami v bagu
- odpadá složitá příprava
- velmi rychlá a snadná manipulace
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.safe-and-easy.com



Logistické informace:

schülke wipes safe & easy bag-in-box system

Karton se 6-ti bagy á 111 ks utěrek

Mat.-Nr. 119546

Karton s 10 zásobníky

Mat.-Nr. 119542

Rozměry utěrek: 30 x 24 cm

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



praktické a ekonomické pro méně rizikové oblasti

schülke wipes

Systém utěrek a zásobníku pro opakované použití na dezinfekci ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše Plus

- snadná manipulace
- životnost až 28 dní
- různé velikosti válců s utěrkami
- certifikovaný zdravotnický prostředek

Více informací na: www.schuelke-wipes.de

Logistické informace:

schülke wipes – zásobníky

schülke wipes mini – zásobník (pro roli 40 ubrousků)

Mat.-Nr. 119530

schülke wipes zásobník – (pro roli 100 ubrousků)

Mat.-Nr. 119523

schülke wipes – ubrousky

schülke wipes mini – ubrousky 40 ks, 10 rolí

Mat.-Nr. 119530

schülke wipes – ubrousky 100 ks, 6 rolí

Mat.-Nr. 119503

Rozměry utěrek: 30 x 30 cm

Příslušenství:

Držák na zeď schülke wipes



www.facebook.com/myschulke



www.youtube.com/schuelkeChannel

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Rober- Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Distributor v ČR:

Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 326
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
schulkecz@schuelke.com
www.schuelke.cz

Distributor v SR:

Schülke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schuelke.sk

Součást skupiny:

