



VŽDY PO RUCE  
NENÁROČNÉ NA MÍSTO

# Ubrousky a utěrky B. Braun

DEZINFEKCE POVRCHŮ  
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A PLOCH  
V PRAKTICKÉM BALENÍ

# ZAMĚŘME SE NA MALÉ KONTAKTNÍ PLOCHY

Účinná dezinfekce malých ploch a zejména povrchů „blízko pacienta“ má vedle hygieny rukou zásadní význam v prevenci šíření infekce. Mikroorganismy jsou schopny přežít v prostředí až několik měsíců. V případě povrchů v blízkosti pacienta pak hrozí nebezpečí jejich přenosu kontaktem s rukama, pokožkou, předměty.

**Ubrusky a utěrky napuštěné dezinfekčními prostředky, které jsou připraveny k okamžitému použití (ready to use, RTU) nebo uzavřený systém utěrek v dóze vám pomohou udržovat vysoký hygienický standard v okolí pacienta.**

Vzhledem k minimálnímu nároku na prostor při umístění mohou být vždy po ruce. Při správné volbě produktů i jejich vzájemné kombinaci je možné dezinfekci provádět okamžitě, cíleně, efektivně a ekonomicky.

## Meliseptol® Wipes Ultra

### DEZINFEKČNÍ UTĚRKY BEZ OBSAHU ALKOHOLU A ALDEHYDŮ

Jsou vhodné pro dezinfekci zdravotnických prostředků a to i takových, které přicházejí do styku se sliznicemi i pro dezinfekci materiálů citlivých na alkoholy jako jsou například ultrazvukové sondy.

Široké spektrum účinku během 2 minut, včetně sporicidního a plně virucidního.



Virucidní a sporicidní účinnost utěrek Meliseptol® Wipes Ultra je čini vhodnými pro závěrečnou dezinfekci povrchů semi-kritických zdravotnických prostředků.

### Meliseptol® Wipes Ultra

| Balení | Rozměr     | Kusů v bal. | Katalog. č. |
|--------|------------|-------------|-------------|
| Dóza   | 14 x 20 cm | 100 kusů    | 19810       |

## Meliseptol® Wipes Sensitive

### ZACHOVEJTE HODNOTU SVÉHO HI-TECH VYBAVENÍ

Rychlá dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků citlivých na alkohol jako jsou monitory, příslušenství ultrazvukových zařízení, inkubátory, věže na operačních sálech, příslušenství PC, dalších zařízení, krytů osvětlení, plastů, apod.

Expozice pro běžné použití: 1 min



Otírání povrchů napuštěným ubrouskem je nevhodnějším a k materiálům i prostředí nejšetrnějším způsobem aplikace rychle působících přípravků na dezinfekci povrchů.



### Meliseptol® Wipes sensitive

| Balení         | Rozměr     | Kusů v bal. | Katalog. č. |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| Dóza           | 15 x 20 cm | 60 kusů     | 19582       |
| Náhradní náplň | 15 x 20 cm | 60 kusů     | 19530       |
| Sáček          | 18 x 20 cm | 100 kusů    | 19894       |

## Meliseptol® HBV ubrousky

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY S RYCHLÝM ÚČINKEM  
DO ZDRAVOTNICKÝCH PROVOZŮ  
S VYSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU,  
PLŇ VIRUCIDNÍ

Ubrousky jsou napuštěny alkoholovým přípravkem Meliseptol® Rapid, který je bez obsahu aldehydů a alkylaminů. Ubrousky jsou jemně parfémovány. Meliseptol® HBV ubrousky jsou uloženy v praktické uzavíratelné dóze. Jejich vyjímání je řešeno s maximálním důrazem na správný hygienický postup.



Expozice pro běžné použití včetně Rota-, Noroviru (MNV): 1 min

### Meliseptol® HBV ubrousky

| Balení         | Rozměr     | Kusů v bal. | Katalog. č. |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| Dóza           | 14 x 20 cm | 100 kusů    | 19096       |
| Náhradní náplň | 14 x 20 cm | 100 kusů    | 19097       |

## B. Braun Wipes Mini

FLEXIBILNÍ SYSTÉM SUCHÝCH UTĚREK V PRAKTICKÉM  
BALENÍ S MINIMÁLNÍM NÁROKEM NA PROSTOR

Utěrky jsou praktické, savé, bezprašné a vždy po ruce. Velmi dobře absorbují a váží špínu. Využívají přípravky B. Braun pro dezinfekci povrchů s použitelností až 4 týdny od přípravy roztoku. Cenově výhodné a ekonomické využití utěrek a dezinfekčních roztoků. Dóza s pevně uzavíratelným víčkem chrání proti kontaminaci a odpařování roztoku.



Utěrky B. Braun Wipes Mini je vhodné používat všude, kde je kladen důraz na hygienu, úklid a rychlé provedení dezinfekce, tj. ve zdravotnictví – v nemocnicích, ambulancích, sanatoriích, ÚSP, ale i ve farmaceutické výrobě, laboratořích, potravinářském průmyslu apod.

### B. Braun Wipes Mini

| Balení     | Rozměr     | Kusů v bal. | Katalog. č. |
|------------|------------|-------------|-------------|
| Dóza       |            | bez utěrek  | 19874       |
| Utěrky     | 24 x 28 cm | 25 kusů     | 19183       |
| ECO utěrky | 15 x 20 cm | 60 kusů     | 19725       |

Doporučeno pro aplikaci přípravků Hexaquart® plus, Hexaquart® forte, Melsept® SF, Meliseptol® rapid a Meliseptol® New Formula.

## Softa® Cloth 2% CHX

UBROUSKY NA DEZINFEKCI POVRCHŮ  
A DEKONTAMINACI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Rychlá a praktická dezinfekce i očista zdravotnických prostředků (především součástí I.V. linky, jako jsou bezjehlové vstupy, kohouty a pod.) v okolí pacienta v jednom kroku.



Alkoholové ubrousky obsahují 2% chlórhexidin doglukonatu a jsou vhodné k ošetřování dezinfekci vstupů do PŽK i CŽK.

### Softa® Cloth CHX 2 %

| Balení   | Rozměr                     | Kusů v bal. | Katalog. č. |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|
| krabička | rozložený:<br>16,2 x 15 cm | 100         | 19581       |
|          | složený:<br>4,2 x 3,2 cm   |             |             |


## Příprava B. Braun Wipes Mini



**1** Naše dózy jsou dodávané čisté, proto není nutno dózu před prvním plněním čistit. Dále postupujte dle níže uvedeného návodu. Při plnění - i opětovném - používejte ochranné rukavice.



**2** Vložte do dózy roli s fleecovými utěrkami. Z prostředku role povytáhněte cíp utěrky.

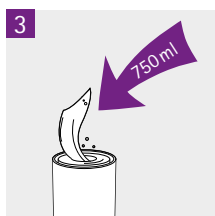

**3** Rovnoměrně zalijte utěrky dezinfekčním roztokem (750 ml). Po 10 minutách dojde k dokonalému nasycení utěrek v dóze.



**4** Protáhněte cíp utěrky víčkem a dózu uzavřete.



**5** Dózu označte štítkem s vyznačeným datem přípravy, použitým přípravkem a informací o koncentraci a expozici.

Při opětovném plnění je nutno zbylé utěrky vyjmout a vytřít vnitřek zásobníku do sucha. Následně zásobník otřít (i vnější povrch včetně víčka) netkanou textilií napuštěnou alkoholovým přípravkem Meliseptol® Rapid. Lze použít ubrousky Meliseptol® HBV.

Dále postupujte dle bodu 2 až 5.